


LuciSwab ES 2.8 – 3.2

Hisopo de muestreo para verificación de limpieza en canales internos de endoscopios flexibles.

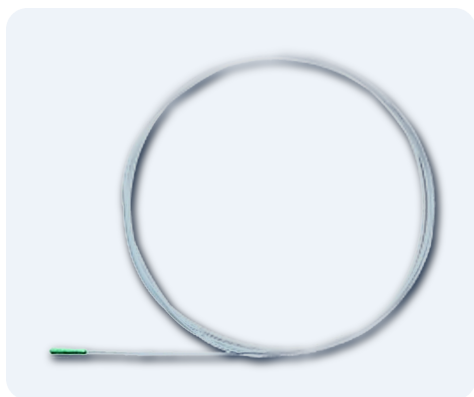

Alcance donde el hisopo convencional no llega.

Hisopo de vástago largo (2,5 metros) diseñado específicamente para verificar la limpieza del canal interior de endoscopios flexibles con diámetro de 2,8 a 3,2 mm. Alcanza zonas anatómicas inaccesibles para los kits LuciPac estándar. De un solo uso, individualmente envasado, sin materiales de PVC. Compatible con el sistema A3 de Kikkoman para lectura en luminómetro Lumitester.

Kikkoman Biochemifa Company · Manual de Instrucciones LuciSwab ES.

LARGO**2,5 m**

Vástago flexible

DIÁMETRO CANAL**2,8 – 3,2 mm**

Endoscopio flexible

CONTENIDO**40 uds.**

Envase individual

REF**60356**

Kikkoman

EL PRINCIPIO

Muestreo del canal interior con lectura A3.

El reprocesamiento de endoscopios flexibles exige verificar la limpieza no solo de la superficie externa sino, sobre todo, del canal interno donde se acumulan residuos orgánicos difíciles de remover. LuciSwab ES es un dispositivo de muestreo que se introduce por el canal, recoge el residuo remanente y se transfiere al hisopo LuciPac A3 para la lectura final en el luminómetro Lumitester. La combinación entrega una verificación cuantitativa en RLU sobre la zona más crítica del endoscopio, con la sensibilidad adicional de la tecnología A3 (ATP + ADP + AMP).

U S O

Cómo se aplica.

Llevar el LuciSwab ES a temperatura ambiente antes de usar. Retirar el hisopo de su envase individual con guantes sin polvo, evitando que la punta toque otras superficies. Si el canal interno del endoscopio está húmedo tras el lavado, el hisopo puede utilizarse directamente; si está seco, humedecer previamente con agua del grifo (no usar solución salina). Insertar el hisopo por la punta proximal del canal y empujar hasta que salga por la punta distal, cuidando no tocar otras superficies. Retirar sosteniendo el vástago a 12 – 13 cm del hisopo y transferir al LuciPac A3 correspondiente. Insertar en el luminómetro Lumitester y presionar START. El resultado en RLU se muestra en 10 segundos.

A P L I C A C I O N E S

Reprocesamiento de endoscopios flexibles · Centrales de esterilización (CEyE) · Verificación post-limpieza manual o mecánica · Control previo a la descarga con alcohol · Auditoría de canales internos con diámetro 2,8 – 3,2 mm · Programas de control de infecciones asociadas a la atención en salud (IAAS).

E S P E C I F I C A C I O N E S

MODELO / PRODUCTO	LuciSwab ES 2.8 – 3.2 (hisopo para canal endoscópico)
REF DE CATÁLOGO	60356
DIÁMETRO DE CANAL COMPATIBLE	2,8 – 3,2 mm
LONGITUD DEL VÁSTAGO	Aprox. 2,5 metros
PRESENTACIÓN	Dispositivo de un solo uso, envasado individualmente. Producto no estéril
CONTENIDO POR CAJA	40 hisopos por kit
MATERIALES PRINCIPALES	Vástago y muestra: tereftalato de polietileno (PET) · Envase individual: polietileno · Caja exterior: papel. Sin materiales de PVC
ALMACENAMIENTO	Temperatura ambiente
KITS DESIGNADOS COMPATIBLES	LuciPac A3 Surface, LuciPac A3 Water, LuciPac Pen y LuciPac Pen-AQUA (Kikkoman Biochemifa)
LUMINÓMETROS COMPATIBLES	Lumitester Smart (REF 61234), Lumitester PD-30 (REF 60486), Lumitester PD-20
FAMILIA LUCISWAB ES	2,0 – 2,2 mm (REF 60355) · 2,8 – 3,2 mm (REF 60356) · 3,7 – 4,2 mm (REF 60357)
FABRICANTE	Kikkoman Biochemifa Company · 2-1-1 Nishi-Shinbashi, Minato-ku, Tokio 105-0003, Japón

R E S P A L D O

Bakke M, Suzuki S. Development of a novel hygiene monitoring system based on the detection of total adenylate (ATP + ADP + AMP). *Journal of Preventive Medicine and Hygiene*. 2019; 60(2): E156 – E161.